

Tilsystemen





betrouwbaar, veilig
& comfortabel!

Het plafondgemonteerde tilsysteem

Het tilsysteem geeft een nieuwe dimensie aan de het tillen en verplaatsen van personen. Aan het plafond worden rails gemonteerd waarin een compacte liftcassette wordt geplaatst. Deze cassette volgt het traject van het railsysteem en kan worden geleverd met uiteenlopende jukken en draagbanden. Het railsysteem kan bestaan uit rechte rails, maar ook uit bochten en kruisingen. Met het ontwerp van het tilsysteem dient uiteraard rekening te worden gehouden met de inrichting van de ruimte en alle uit te voeren tilhandelingen.

Specialist in aangepast wonen

Of het nu gaat om zelfstandig wonen, begeleid wonen of wonen in een instelling. In huis willen we ons thuis voelen, daarin zoeken we rust en willen we passief of actief kunnen ontspannen. Als een woning niet geschikt is vanwege een lichamelijke beperking dient daarom een vooruitstrevende en betaalbare oplossing te worden gecreëerd, met oog voor detail.

Domicare biedt hiervoor een totaalconcept waarbij aan alle details voor een succesvolle woningaanpassing is gedacht. De klant kan hierop vertrouwen zonder vervelende verrassingen achteraf.

Door een beweegbare rail met trolleys haaks onder twee vaste rails te plaatsen, ontstaat een zogenaamd XY systeem waarmee de lift een groot vlak kan bereiken. Bij toepassing van een XY systeem hoeft daarom nauwelijks rekening te worden gehouden met de inrichting. Ook is het mogelijk deze systemen aan elkaar te koppelen, of jukken van het systeem over te nemen in andere systemen.

Met aantoonbare vermindering van de stress, inspanning en blessures wordt het werken met een tillift voor de verzorger weer leuk, terwijl de bewoner het systeem als veilig & comfortabel ervaart!

Plafondliften VH 130 - 270

Alle benodigde functies en 100% betrouwbaar

Onze nieuwste generatie plafondliften is een uiterst doorontwikkeld product, zowel de basis voor het ontwerp als de toegepaste componenten hebben hun kwaliteit sinds jaar en dag bewezen. De lift voorziet in alle benodigde functies, gericht op 100% betrouwbaarheid en zelfredzaamheid zonder tussenkomst van technici. Deze moderne plafondlift is in 2009 door de producent geïntroduceerd, en kent inmiddels ruim 25.000 tevreden gebruikers.



De lift beschikt standaard over:

- Elektrische hoog/laag functie
- Handmatige hoog/laag functie (noodvoorziening)
- Nood-stop functie
- Dubbele nood-omlaag functie (zowel elektrisch als handmatig)
- Automatische afslag bij bereiken maximale tilhoogte
- Automatische afslag bij overbelasting
- Mechanisme t.b.v. verdraaiing van de hijsband (stabilisatie)
- Automatische afslag bij verdraaiing van de hijsband
- Beveiliging van afrollen hijsband zonder belasting
- Display met indicatie accu-capaciteit en aantal liftmomenten
- Led indicatie en geluidssignalen (instelbaar)
- Bedieningsmogelijkheid voor kruisingen middels de handbediening
- In de rail geïntegreerde oplader voor de accu's
- Voor de gebruiker toegankelijk onderhoudsmenu middels handbediening & display
- Tweepunts tiljuk met extra ophangpunten, veilige en afgeronde bevestigingshaken (RVS)
- Volledig waterbestendige handbediening (pneumatisch)
- Maximale belasting naar keuze 130 – 200 – 270 kg. / Model C-380 belastbaar tot 380 kg.
- Optioneel is de lift leverbaar met:
 - Elektrische aandrijving voor/achteruit (zelfrijdende lift),
 - Infra rood afstandsbediening (alle functies), meerprijs
 - Elektrisch bedienbaar kanteljuk, bediening geïntegreerd in handbediening lift
 - Tilframes voor zelfstandig gebruik van de plafondlift zonder tilbanden

Compacte afmetingen

Toepasbaar in ruimtes met een laag plafond



Het ontwerp wordt gekenmerkt door vriendelijk afgeronde hoeken, éénvoud en compacte afmetingen. Met een hoogte minder dan 15 cm, behoort de plafondlift tot de kleinste in z'n soort, geschikt voor professioneel gebruik. Dit biedt niet alleen optische voordelen, maar levert vooral extra tilhoogte waardoor de plafondlift ook toepasbaar is in ruimtes met een laag plafond.



Met een hoogte minder dan 15 cm, behoort de plafondlift tot de kleinste in z'n soort, geschikt voor professioneel gebruik.

Functioneel display

Direct nuttige informatie, zonder laptop of ingewikkelde software

De standaard geïntegreerde display van de plafondlift verschaft u direct informatie, zonder tussenkomst van laptops of ingewikkelde software. De lift registreert het aantal liftmomenten, en geeft zelf aan wanneer de plafondlift aan een servicebeurt toe is. In de display kan direct de actuele status worden afgelezen, zoals de capaciteit van de accu's, eventuele storingsmeldingen en waarschuwingen voor de gebruiker. De display van de plafondlift verschaft u tevens toegang tot het onderhoudsmenu. Hierin kan bijvoorbeeld de snelheid van de lift snel en eenvoudig worden aangepast, zonder tussenkomst van technici.

In de display kan direct de actuele status worden afgelezen.



Pneumatische handbediening

Nooit meer defecte stekerverbindingen, kabelbreuken of loszittende contacten

Defecten aan handbedieningen zijn verantwoordelijk voor het niet functioneren van veel tilliften. Om die reden is extra aandacht geschonken aan het ontwerp van een storingsvrije bediening!

Door het gelijktijdig indrukken van beide bedieningsknoppen wordt de plafondlift automatisch teruggestuurd naar het oplaadpunt.



De handbediening van de plafondlift is ergonomisch gevormd, voorzien van grote gebruiksvriendelijke drukknoppen en 100% waterbestendig. De handbediening werkt met luchtdruk (pneumatisch) en is daardoor niet gevoelig voor kabelbreuken. Defecte stekerverbindingen, kabelbreuken of loszittende contacten behoren hiermee definitief tot het verleden!

Bij de ontwikkeling van de bediening is tevens rekening gehouden met het feit dat de plafondlift hieraan vaak wordt voortbewogen door de rail, en is daarom erg sterk. Indien er te hard aan de bediening wordt getrokken zal de connectie worden verbroken, waarna deze simpelweg weer kan worden hersteld. Indien er na verloop van tijd toch schade aan de luchtslang ontstaat kan de handbediening snel en eenvoudig worden vervangen zonder tussenkomst van een monteur. De kosten voor het vervangen van een handbediening worden hierdoor tot een minimum beperkt.



De plafondlift is een verbeterde versie van een beproefd concept.

Unieke noodvoorzieningen

De enige plafondlift die ook handmatig kan tillen

De plafondlift is een verbeterde versie van een beproefd concept en daardoor uiterst betrouwbaar. Indien de plafondlift u desondanks toch in de steek laat, kan de gebruiker altijd omlaag worden gebracht tot een veilige hoogte door zowel een elektrische als mechanische nood-omlaag functie.

De plafondlift wordt als enige in z'n soort standaard geleverd met een adapter waarmee de lift handmatig volledig te bedienen is. Indien er problemen zouden ontstaan met de elektrisch aangedreven hoog/laag motor, kunnen ten aller tijde handmatig transfers worden uitgevoerd, zowel omhoog als omlaag, totdat de plafondlift is gerepareerd.

Universeel toepasbaar

Zowel thuis als in instellingen

De mogelijkheid om de maximale belasting in te perken van 270 tot 130 kg biedt aanzienlijke voordelen ten aanzien van de gewenste plafondsterkte, hulpconstructies en bevestigingsmethode.

De lift kan zeer soepel handmatig in de rail worden voortbewogen door de verzorger, en kan worden uitgevoerd met ieder gewenst type tiljuk. Voor het zelfstandig bedienen van de lift zijn een aandrijfmotor, infrarood afstandsbediening en diverse tilframes leverbaar.

De plafondlift kan worden geleverd met adapters voor tilsystemen van diverse merken zoals Liko, Guldmann & Arjo.

Door het unieke ontwerp van de plafondlift kunnen de rails van het tilsysteem worden onderbroken ten behoeve van gordijnrails.



Slim koppelsysteem

Zonder bediening van knoppen, zonder te wachten, zonder stroomvoorziening, soepel en 100% betrouwbaar!

Door een beweegbare rail met trolleys haaks onder twee vaste rails te plaatsen, ontstaat een zogenaamd XY tilsysteem waarmee de plafondlift een groot vlak kan bereiken. Zowel het vaste railsysteem als het XY systeem kunnen eenvoudig worden gecombineerd door middel van een uniek koppelsysteem.

Het koppelsysteem werkt volledig mechanisch, zonder bediening van knoppen, zonder te wachten, zonder stroomvoorziening, soepel en 100% betrouwbaar! Zodra de beweegbare rail gekoppeld wordt kan de plafondlift vrij doorgang vinden zonder te schakelen. Vanuit de vaste rail kan de lift direct rechts of links worden bewogen zonder te schakelen, te wachten of het risico een storing te veroorzaken!

Flexibele kruisingen

Bediend via de lift. Het aanleggen van stroomvoorzieningen en wandschakelaars behoort tot het verleden!

De kruisingen kunnen worden bediend met buttons op de handbediening van de tillift en maken voor de stroomvoorziening gebruik van de accu's van de tillift. Het aanleggen van een stroomvoorziening en het plaatsen van wandschakelaars voor kruisingen behoren hiermee dus definitief tot het verleden! Bij het splitsen van een railtraject kan worden gekozen uit uiteenlopende richtingen.

Ook zijn handmatig bedienbare kruisingen leverbaar. Deze kruisingen beschikken over maar liefst 12 verschillende richtingen waarin het railsysteem kan worden aangesloten.




Deurdoorgangen

Deuropeningen kunnen worden verhoogd zodat de rail vrij doorgang kan vinden, en de gebruiker snel en eenvoudig kan worden verplaatst van kamer naar kamer. Hiervoor zijn diverse soorten draaideuren en schuifdeuren mogelijk in combinatie met het tilsysteem. Doordat zowel de montage van deuren als het tilsysteem door eigen ervaren teams kunnen worden uitgevoerd, worden deze werkzaamheden en maatvoeringen probleemloos en efficiënt op elkaar afgestemd.



Overpaksystemen & draagbare plafondlift

In plaats van het aanpassen van deuren en kozijnen kan er worden gekozen voor een lifttype dat onder het kozijn kan worden overgepakt. Hierbij is dan geen bouwkundige aanpassing nodig. Het overpakken kan middels twee plafondliften waarbij slechts het tiljuk met de draagband wordt overgepakt van de ene naar de andere ruimte, inclusief de gebruiker. Ook kan het overpakken met behulp van een draagbare plafondlift die in zijn geheel wordt overgepakt inclusief de gebruiker. De draagbare plafondlift kan ook worden gebruikt in andere ruimtes of woningen, en is leverbaar inclusief handige koffer.

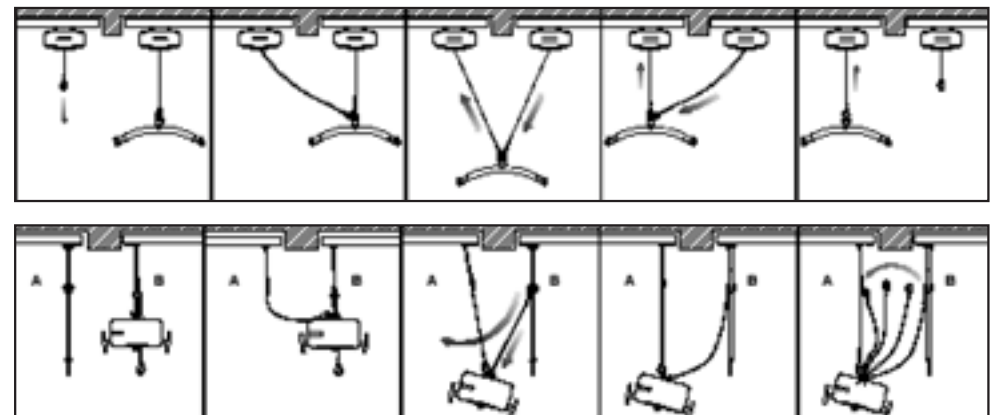

Plafondlift C-136 / en P-200 FLEX

Veilige transfers met obesitas cliënten

De FLEX liften zijn extreem licht en compact, met toch een indrukwekkende maximale belasting van 136 kg. Net als onze overige liften zijn ook deze mini liften voorzien van de belangrijkste veiligheids-voorzieningen zoals een nood-omlaag functie.

De liften kunnen worden toegepast in een standaard tilsysteem maar ook in flexibel inzetbare vrijstaande tilsystemen.

Kenmerken:

- Compact, licht in gewicht en leverbaar met transportkoffer
- Tilbereik van 196 cm.
- Snel en eenvoudig te plaatsen in het tilsysteem
- Stil in gebruik, inclusief soft start/stop functie
- Geschikt voor 20 – 25 volledige tilhandelingen
- Waarschuwing bij te lage accuspanning



Plafondlift C-380

Veilige transfers met obesitas cliënten

Om de werklast bij het verzorgen van obesitas cliënten tot een minimum te beperken bieden we een plafondlift met een maximale belasting tot 380 kg. De lift kan soepel handmatig in de rail worden voortbewogen door de verzorger, maar kan ook worden voorzien van een aandrijfmotor en eventueel infrarood afstandsbediening.

De lift kan worden uitgevoerd met ieder gewenst type tiljuk, waaronder het speciaal voor zwaardere cliënten ontwikkelde 4-punts kruisjuk. Er zijn voor dit type juk en deze doelgroep zowel standaard als speciaal op maat gemaakte tilbanden leverbaar.

De plafondlift C-380 is in vele opzichten vergelijkbaar met de VH serie:

- Volledig in de rail geïntegreerd laadsysteem voor permanente stroomvoorziening (optie)
- Noodstop en nood-omlaag functie
- 380 kg weegschaal (optie)
- Vierpuntsjuk met quick-release bevestiging



Alle denkbare jukken, frames & tilbeugels

Domicare biedt verreweg de meest uiteenlopende oplossingen ten aanzien van jukken, draagbanden en accessoires!

De keuze voor een juk kan het beste worden bepaald tijdens een passing met de draagbanden. Hierbij wordt rekening gehouden met specifieke wensen van de gebruiker, de tilhoogte en het bedieningsgemak. Ook wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met gebruik van draagbanden van verschillende merken. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld verblijfsbanden eenvoudig worden uitgewisseld met systemen op andere locaties, zoals bijvoorbeeld de dagopvang.

Het plafondgemonteerd tilsysteem kan worden geleverd met:

- tweepuntsjuk of vierpuntsjuk
- kanteljuk (handmatig of elektrisch bedienbaar)
- comfort tilbeugel voor zelfstandig gebruik
- sta frame voor actief tillen

Infrarood bediening voor zelfstandig gebruik

Zowel de plafonlift als beweegbare rails kunnen worden voorzien van een elektrische aandrijving en infrarood afstandsbediening. De lift kan worden voorzien van een comfort tilbeugel waarbij de gebruiker volledig automatisch wordt getild, zonder hiervoor een draagband aan te leggen.



Kanteljukken

Het kanteljuk is speciaal ontwikkeld voor het tillen van personen waarbij de zitpositie tijdens het uitvoeren van de transfer moet worden aangepast. Domicare kanteljukken (zowel handmatig als elektrisch) onderscheiden zich vanwege het vernieuwde zeer compacte ontwerp en worden bediend vanaf de bij de lift geleverde handbediening (aan spiraalsnoer of IR).

Afhankelijk van specifieke toepassingen kunnen verschillende merken en soorten kanteljukken worden geleverd.

Tweepuntsjuk

Het compacte tweepuntsjuk is geschikt voor het tillen vanuit zowel zittende als liggende positie dankzij het unieke ontwerp van de bijbehorende draagbanden. Tweepuntsjukken zijn leverbaar in diverse maten.

Draagbanden

Hoewel draagbanden qua vorm en maatvoering op elkaar kunnen lijken verschilt de toepassing, het comfort of het aanleggen ervan in de praktijk per merk en type. Alvorens na te denken over de verschillende mogelijkheden op het gebied van tillen en verplaatsen wordt daarom aangeraden een passing met de draagbanden uit te voeren! Domicare levert een enorm assortiment draagbanden van diverse merken, waaronder de zeer praktisch ontworpen draagbanden van Prism Medical.

Deze draagbanden zijn vervaardigd van duurzaam materiaal dat zich kenmerkt door sterke elasticiteit, kunnen eenvoudig in de wasmachine worden gereinigd (max. 85 graden) en zijn geschikt voor de wasdroger.

Door het bijzonder slimme ontwerp van deze draagbanden kan vanuit een liggende naar zittende houding worden getild, waarbij de draagband automatisch een natuurlijke beweging simuleert zonder hulp of inspanning van de verzorger. Ook kan de zitpositie van de gebruiker naar wens worden aangepast van een min of meer liggende houding naar een rechtop zittende houding met een compact tweepuntsjuk.

De draagbanden van Prism Medical onderscheiden zich door een elastische randafwerking, waardoor drukpunten tot een minimum worden beperkt. De lussen van de draagbanden kunnen snel en eenvoudig worden opgeborgen.

VIP draagband
t.b.v. kanteljuk



Net draagband
t.b.v. kanteljuk



Net draagband
t.b.v. kanteljuk



Amputatie band



Toilet draagband,
optie extra hoofd-
ondersteuning



Voor het uitvoeren van transfers in
liggende positie zijn diverse jukken met
draagbanden leverbaar



Tilbeugel voor zelfstandig gebruik

Met de comfort tilbeugel wordt de gebruiker volledig automatisch getild, zonder hiervoor een draagband aan te leggen. In combinatie met extra ondersteuning van bovenarmen en beensteunen kunnen hierdoor transfers zelfstandig en veilig worden uitgevoerd. Doordat de zijwaartse druk die hierbij wordt uitgeoefend op unieke wijze kan worden aangepast, biedt deze Domicare tilbeugel aanzienlijk meer comfort dan vergelijkbare tilbeugels.



Service

Betrouwbaarheid is één van de belangrijkste factoren bij de keuze voor een merk of product. De plafondliften blinken op dit punt zeker uit ten opzichte van andere merken. Het gehele ontwerp inclusief de techniek en gebruikte componenten er op gericht op betrouwbaarheid. Daarnaast is de VH-200 serie als enige lift in z'n soort voorzien van een handmatige noodvoorziening zodat er ondanks een elektronische storing toch met de lift gewerkt kan worden.

Door toepassing van eenvoudige, standaard, componenten en een doordacht ontwerp is de plafondlift uitermate geschikt voor het zelfstandig uitvoeren van eerstelijns onderhoud. Zo kunnen bijvoorbeeld handbedieningen of accu's eenvoudig worden vervangen indien dit nodig blijkt.

Om de betrouwbaarheid en veiligheid van uw plafondlift te blijven waarborgen bieden we servicecontracten voor periodieke keuringen, waarbij tevens kleine mankementen of modificaties kunnen worden uitgevoerd. U profiteert hierbij meteen van onze storingsdienst, indien uw plafondlift u desondanks in de steek laat. Raadpleeg onze servicecontracten of website voor bereikbaarheid, responsetijden en tarieven.



Verhuizen, depot & herplaatsen

Dankzij de verschillende componenten is het goed mogelijk om het tilsysteem te verhuizen. Het railsysteem kan eenvoudig worden gedemonteerd en compact opgeslagen. Doordat de rails eenvoudig kunnen worden ingekort, rails en bochten kunnen worden toegevoegd of anders toegepast kan het systeem in geheel nieuwe situaties flexibel worden ingezet.

Hulpmiddelen compleet geïnstalleerd

Domicare kenmerkt zich door een zogenaamd no-nonsense beleid; "Wij hebben de ervaring en zijn gespecialiseerd in het installeren van hulpmiddelen. Wij dienen er dus voor te zorgen dat aan alle details wordt gedacht en de klant goed wordt geïnformeerd."

Domicare biedt een totaalconcept waarbij de klant mag verwachten dat het ook echt alles omvat wat nodig is om een woningaanpassing tot een succes te maken!

Organisatie

Sinds 1996 leveren en monteren wij hulpmiddelen. Ons assortiment is specifiek samengesteld voor het aanpassen van woningen, en we verzorgen de complete montage inclusief alle bouwkundige werkzaamheden! Domicare levert woningaanpassingen door heel Nederland.

Een complete oplossing

Een enkel product biedt vaak slechts een oplossing voor ontstane moeilijkheden bij één bepaalde activiteit of handeling. Door de samenstelling van ons assortiment en onze werkwijze ontstaat echter een complete oplossing voor zowel tillen als verplaatsen, het overbruggen van trappen, koken, baden en douchen.

Showroom

Veel van onze producten kunnen in onze showroom worden gedemonstreerd, een bezoekje kan dus zeker de moeite waard zijn! Voor een bezoek aan onze showroom verzoeken wij u vooraf even een afspraak te maken om er zeker van te zijn dat de juiste adviseur en producten aanwezig zijn.



Zweedsestraat 8 A 13
7418 BG Deventer

TELEFOON
0570 62 44 62
FAX
0570 63 57 22

EMAIL
info@domicare.nl
INTERNET
www.domicare.nl